

color

Kit de Recolha de Teste COVID-19 Não Monitorizado

Instruções no local

Antes de começar:

- A sua amostra deve ser deixada no ponto de recolha designado do seu teste no mesmo dia em que a recolher.
- Certifique-se de que há uma recolha hoje. Verifique com o coletor do seu teste COVID-19 quais as amostras que serão aceites hoje.
- Não perca a última recolha. Verifique com o coletor do seu teste COVID-19 a hora da última recolha.

O seu kit inclui:



Swab



Collection tube



Barcode card



Biohazard bag

1

Ative o seu kit *online* em color.com/covid/activate.

Precisa do seu código de barras único, que encontrará no seu tubo de recolha.




! **Aviso: A sua amostra não será testada se o kit não estiver ativado.**

2

Antes de recolher a sua amostra, lave as suas mãos cuidadosamente durante 20 segundos e seque-as bem.

Este kit de recolha caseiro só é autorizado pela duração da declaração de que há circunstâncias que a autorização do uso de emergência de diagnósticos in vitro para a deteção e/ou diagnóstico da COVID-19 da Secção 564(b)(1) da Lei, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), a menos que a autorização seja cessada ou revogada.


3

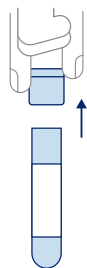

Retire a tampa do tubo de recolha.

Mantenha a tampa perto.

4

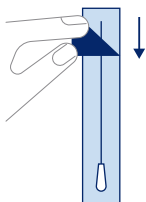


Abra a embalagem do esfregaço.

A começar pela ponta do puxador da embalagem do esfregaço, retire o suporte de papel. Puxe o esfregaço da sua embalagem pelo puxador.

Nota: Não toque na ponta macia com as suas mãos nem a deite sobre nenhuma superfície.

5

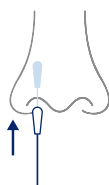


Gire a ponta do esfregaço na primeira narina, 3 vezes.

Insira-o numa narina até que a ponta macia deixe de ser visível, cerca de 2,5 cm. Gire-o circularmente dentro da borda interna da sua narina pelo menos 3 vezes.

Nota: Não force mais o esfregaço.

6

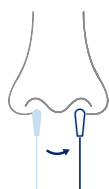

Gire a ponta do esfregaço na outra narina, 3 vezes.

Repita o passo anterior na segunda narina, usando a mesma extremidade do esfregaço.

Nota: Deverá usar o mesmo esfregaço para as duas narinas.


7



Ponha o esfregaço do tubo de recolha.

A ponta macia que entrou no seu nariz deverá entrar primeiro no tubo.

8

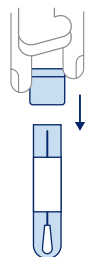

Empurre para fechar a tampa do tubo de recolha.

Está quase pronto! Assegure-se de que a parte superior está firmemente fechada.

Nota: Depois de fechar o tubo de recolha, lave as suas mãos cuidadosamente durante 20 segundos e seque-as bem.

9



Ponha o tubo de recolha no saco de perigo biológico.

Sele o saco fechado.

10



Leve o saco de perigo biológico para o ponto de recolha designado do seu teste.

O coletor do seu teste COVID-19 mostrar-lhe-á onde depositar a sua amostra.

Nota: Se perder a hora da última recolha de hoje, peça ao coletor do seu teste COVID-19 um novo kit.

Lista de verificação antes de devolver o seu *kit*:

- Ativou o seu *kit*?
- Recolheu uma amostra de ambas as narinas?

Visite color.com/sample-return para saber mais.

Perguntas?

Visite support.color.com ou contacte-nos em support@color.com ou (844) 352-6567.

Antes de começar:

- A sua amostra deve ser deixada no ponto de recolha designado do seu teste no mesmo dia em que a recolher.
- Certifique-se de que há uma recolha hoje. Verifique com o coletor do seu teste COVID-19 quais as amostras que serão aceites hoje.
- Não perca a última recolha. Verifique com o coletor do seu teste COVID-19 a hora da última recolha.

O seu kit inclui:



Swab



Collection tube



Barcode card

Biohazard
bag

1

Ative o seu kit *online* em color.com/covid/activate.

Precisa do seu código de barras único, que encontrará no seu tubo de recolha.



! **Aviso:** A sua amostra não será testada se o kit não estiver ativado.


2

Antes de recolher a sua amostra, lave as suas mãos cuidadosamente durante 20 segundos e seque-as bem.

3

Retire a tampa do tubo de recolha.

Mantenha a tampa perto.

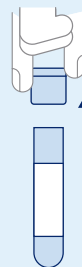



4

Abra a embalagem do esfregaço.

A começar pela ponta do puxador da embalagem do esfregaço, retire o suporte de papel. Puxe o esfregaço da sua embalagem pelo puxador.

Nota: Não toque na ponta macia com as suas mãos nem a deite sobre nenhuma superfície.

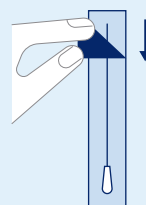

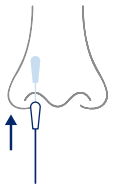

5

Gire a ponta do esfregaço na primeira narina, 3 vezes.

Insira-o numa narina até que a ponta macia deixe de ser visível, cerca de 2,5 cm. Gire-o circularmente dentro da borda interna da sua narina pelo menos 3 vezes.

Nota: Não force mais o esfregaço.



6

Gire a ponta do esfregaço na outra narina, 3 vezes.

Repita o passo anterior na segunda narina, usando a mesma extremidade do esfregaço.

Nota: Deverá usar o mesmo esfregaço para as duas narinas.

7

Ponha o esfregaço do tubo de recolha.

A ponta macia que entrou no seu nariz deverá entrar primeiro no tubo.




8

Empurre para fechar a tampa do tubo de recolha.

Está quase pronto! Assegure-se de que a parte superior está firmemente fechada.

Nota: Depois de fechar o tubo de recolha, lave as suas mãos cuidadosamente durante 20 segundos e seque-as bem.

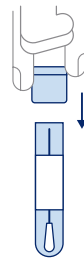

9

Ponha o tubo de recolha no saco de perigo biológico.

Sele o saco fechado.



10

Leve o saco de perigo biológico para o ponto de recolha designado do seu teste.

O coletor do seu teste COVID-19 mostrar-lhe-á onde depositar a sua amostra.

Nota: Se perder a hora da última recolha de hoje, peça ao coletor do seu teste COVID-19 um novo kit.



Lista de verificação antes de devolver o seu *kit*:

- Ativou o seu *kit*?
- Recolheu uma amostra de ambas as narinas?

Visite color.com/sample-return para saber mais.

Perguntas?

Visite support.color.com ou contacte-nos em support@color.com ou (844) 352-6567.

Só Para Uso em Risco, Só Para Uso em Emergência. Este kit de recolha caseiro não foi aprovado e reconhecido pela FDA. Este kit de recolha caseiro foi autorizado pela FDA nos EUA.

Este kit de recolha caseiro foi autorizado só para recolha caseira e manutenção de espécimes nasais como ajuda à detecção do ácido nucleico do SARS-CoV-2 e não para quaisquer outros vírus ou agentes patogénicos.